

你還在用Matrigel嗎? 你有更好的選擇

TREVIGEN[®] Cultrex[®] BME

給你

二高


高品質
高濃度 12-18mg/ml

三捷

潔淨 無病原菌或LEDV
節省 可稀釋
便捷 可供多種實驗使用

四特快

快速使用
快速凝膠
快速生長
快得DATA

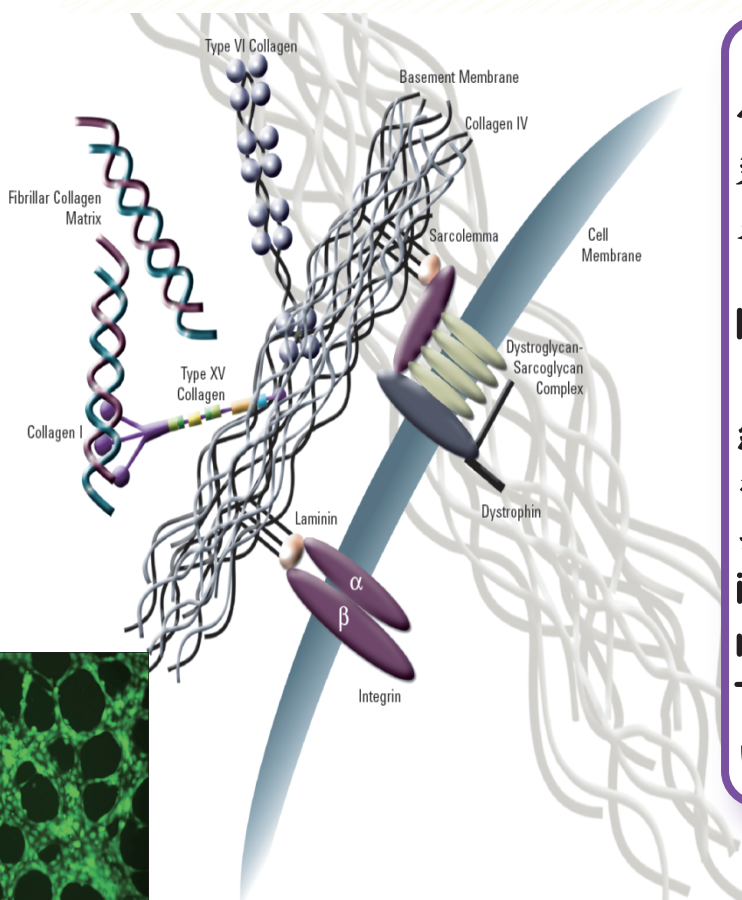

Cultrex[®] BME 是一種可溶性基底膜蛋白質萃取物，它能夠在37°C條件下凝膠重新形成基底膜，其成分包含Laminin I，Collagen IV，entactin 和 heparin sulfate proteoglycan等因子，有助於維持或促進內皮細胞、上皮細胞、神經細胞、管線細胞、平滑肌細胞的分化型態可應用於angiogenesis、invasion、neurite out growth、migration 等研究範疇。Trevigen提供多種配置和規格的BME產品可供選擇。



Catalog No.	Description	size	price
3432-005-01	Cultrex [®] Basement Membrane Extract, PathClear [®]	5ml	9,500
3432-010-01	Cultrex [®] Basement Membrane Extract, PathClear [®]	10ml	13,800
3433-005-01	Cultrex [®] Reduced Growth Factor BME, PathClear [®]	5ml	9,500
3433-010-01	Cultrex [®] Reduced Growth Factor BME, PathClear [®]	10ml	13800

Catalog No.	Description	size	Catalog No.	Description	size
3442-050-01	Cultrex [®] Bovine Collagen I	50 mg	3440-100-01	Cultrex [®] Rat Collagen I	100 mg
3416-001-01	Cultrex [®] Bovine Fibronectin	1 mg	3410-010-01	Cultrex [®] Mouse Collagen IV	1 mg
3417-001-01	Cultrex [®] Bovine Vitronectin	50 mg	3400-010-01	Cultrex [®] Mouse Laminin I	1 mg