




BIO-CANDO 小鼠活動力滾輪計數籠

Running Mouse

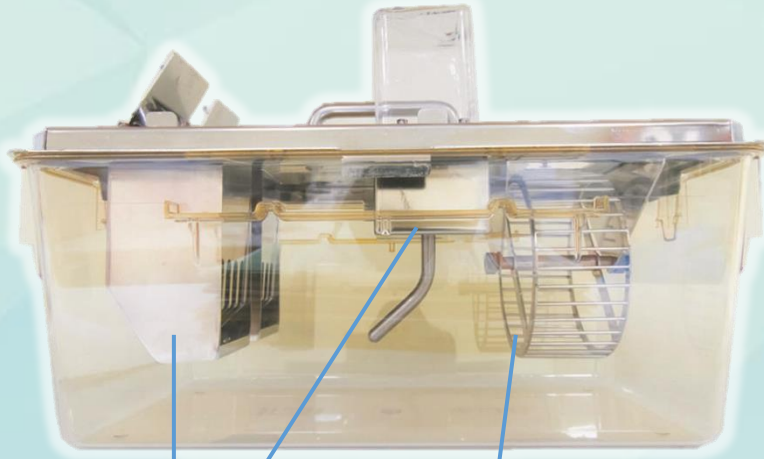


食物槽與水瓶槽

快拆式設計，方便秤重計量
附三組插槽，可進行**食物喜好實驗**

小鼠滾輪

一圈**36根不鏽鋼橫桿**
附**固定插梢**，可**限制運動時間**
附**檔板**，可**半強制小鼠進行運動**

以**單位時間**方式儲存數據，
搭配紀錄器系統，可同時記錄**四組**鼠籠活動力數據

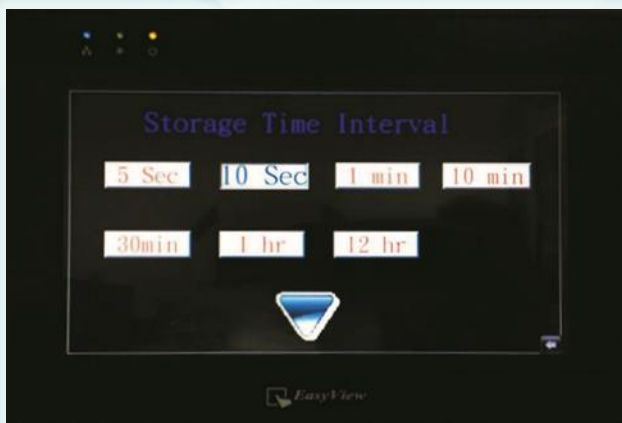

可選單位 **5sec/10sec/1min/10min/30min/1hr/12hr**




實驗數據範例：



日期	時間	累積圈數	單位時間圈數	日期	時間	累積圈數	單位時間圈數
2015/8/14	0:23:31	4418	388	2015/8/14	12:15:44	8714	0
2015/8/14	0:53:27	4829	411	2015/8/14	12:45:38	8714	0
2015/8/14	1:23:22	5244	415	2015/8/14	13:15:34	8714	0
2015/8/14	1:53:18	5645	401	2015/8/14	13:45:30	8714	0
2015/8/14	2:23:14	6085	440	2015/8/14	14:25:51	8714	0
2015/8/14	2:53:08	6542	457	2015/8/14	14:55:19	0	0
2015/8/14	3:23:04	6965	423	2015/8/14	15:25:15	14	14
2015/8/14	3:52:59	7430	465	2015/8/14	15:55:11	14	0
2015/8/14	4:22:55	7795	365	2015/8/14	16:25:05	14	0
2015/8/14	4:52:51	8175	380	2015/8/14	16:55:01	14	0
2015/8/14	5:22:46	8403	228	2015/8/14	17:24:56	14	0
2015/8/14	5:52:42	8652	249	2015/8/14	17:54:52	14	0
2015/8/14	6:22:37	8662	10	2015/8/14	18:24:48	16	2
2015/8/14	6:52:32	8662	0	2015/8/14	18:54:43	16	0
2015/8/14	7:22:28	8662	0	2015/8/14	19:24:38	16	0
2015/8/14	7:52:23	8674	12	2015/8/14	19:54:33	30	14
2015/8/14	8:22:19	8674	0	2015/8/14	20:24:29	392	362
2015/8/14	8:52:15	8689	15	2015/8/14	20:54:25	795	403
2015/8/14	9:22:10	8689	0	2015/8/14	21:24:20	1211	416
2015/8/14	9:52:05	8689	0	2015/8/14	21:54:16	1563	352
2015/8/14	10:22:00	8689	0	2015/8/14	22:24:12	1883	320
2015/8/14	10:51:56	8709	20	2015/8/14	22:54:06	2206	323
2015/8/14	11:21:52	8709	0	2015/8/14	23:24:02	2562	356
2015/8/14	11:46:21	8714	5	2015/8/14	23:53:57	2962	400

活動力測試

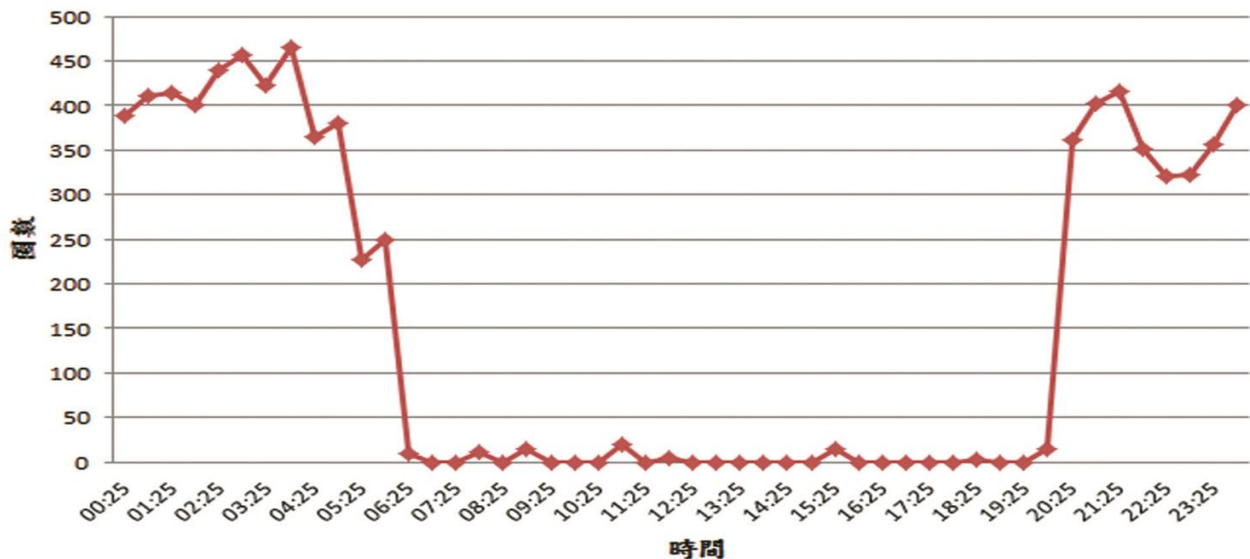

- * 內建數據紀錄軟體系統，可將數據轉換為 檔案
- * 及時紀錄 **日期/時間/累積圈數**，可依不同需求呈現
- * 可利用 進行系統性數據整合，以利實驗觀察分析

