

GelCAP BW

超迷你 照膠系統

原價\$35,000(20%off)

行動優惠價\$28,000
(不含手機)

價格SO EASY/攜帶移動SO HAPPY/多功能SO SMART

特點:

- 機體小巧，可提供 10 x 10 cm 膠片照相範圍
- 三段可調 Epi 藍光燈源，適用於 DNA / Protein 膠體影像擷取。
- 白光板燈源，適用於彩色膠體影像，菌落影像等。
- 三段可調 Epi 藍光燈源，產生最佳膠體影像品質，
- 濾鏡調整器可用於大多數智慧型手機及平板。
- 整合直覺式影像擷取 APP，操作便利。



應用:



GelCAP BW 結合現在智慧型手機擁有高解析度相機的特點，可以快速擷取 DNA / Protein 膠體影像，使實驗紀錄及分析更為方便。系統使用 Epi 藍光燈源，能安全有效觀察電泳膠體的安全染劑螢光訊號。此外，GelCAP BW 的白光板燈源，亦能輕鬆處理 SDS-PAGE，並同時在相同白光板燈源下，菌落影像也能輕鬆獲取。整合直覺式影像擷取 APP，讓您的智慧型手機及平板，透過 Wi-Fi、藍牙或手機資料傳輸系統來預覽、編輯、分享並儲存於雲端來達到即時列印影像。



翰新國際有限公司



TEL: (02) 2877-1122
hycellbio@gmail.com



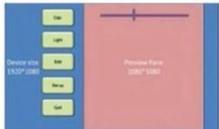
GelCAP BW

超迷你 照膠系統

價格SO EASY/攜帶移動SO HAPPY/多功能SO SMART

原價\$35,000(20%off)

行動優惠價\$28,000
(不含手機)

產品名稱	GelCAP-BW
照膠平台	
Epi 藍光燈源	470 nm
白光板	有
箱體及白光板	
GelCAP BW APP	
應用	DNA: ECO Safe, SYPRO Safe, GelGreen Protein: SYPRO Ruby, Lightning Red, Silver/ Coomassie blue, Colony Plate Observation (菌落觀察)
膠片照相範圍	10 x 10 cm
輸出/輸入控制埠	1 x Mini USB Port for Smartphone Connection (mini to micro USB cable included)
照膠平台尺寸(長x寬x高)	216 x 168 x 54 mm
箱體尺寸(長x寬x高)	211 x 161 x 108 mm
全機組裝尺寸(長x寬x高)	216 x 168 x 128 mm
重量	1.2 Kg
電源	12V/1.5A
系統需求 (安卓系統智慧型手機/平板)	安卓系統5.0以上(長時間曝光攝影) 四核心CPU以上 2GB RAM, 16GB ROM 感光元件 13mp, 光圈 f2.4以下



翰新國際有限公司



TEL: (02) 2877-1122
hycellbio@gmail.com

