


Annexin-V Kits

細胞凋亡快速檢測試劑組

細胞凋亡初期，細胞膜內層的磷脂絲氨酸 phosphatidylserine (PS) 會外翻到細胞膜表面，使細胞膜失去不對稱性，以作為吸引吞噬細胞的信號

Annexin-V 為一種磷脂結合蛋白，對 PS 具有高度親和性，引此該蛋白可作為一敏感的探針來檢測暴露在細胞表面的 PS。搭配細胞活性染劑 propidium iodide (PI) 或是 7-AAD，可同時達到辨識細胞壞死與細胞凋亡的實驗目的。


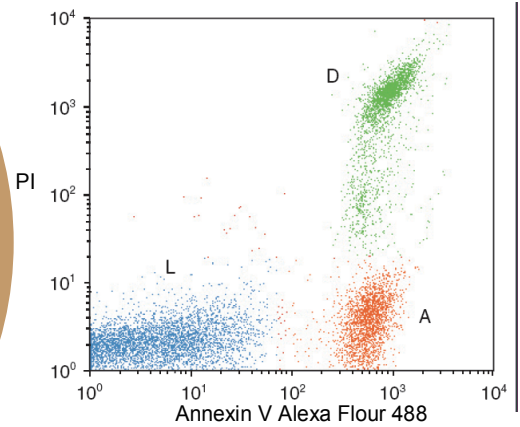


產品編號	產品名稱	包裝	優惠特價
731718	ApoScreen Annexin V-FITC / PI Kit	100 tests	\$16,800
IM3546	Annexin V-FITC / PI Kit	200 tests	\$24,000
IM3614	Annexin V-FITC / 7-AAD Kit	150 tests	\$18,000
731727	ApoScreen Propidium (PI)	100 tests	\$3,000
736551	ApoScreen 7-AAD	100 tests	\$2,400
4830-01-k	TACS™ Annexin V FITC / PI Kit	100 tests	\$13,500
4830-250-k	TACS™ Annexin V FITC / PI Kit	250 tests	\$28,900

超亮眼 Alexa Fluor 488 較 FITC 擁有更閃爍且持久之螢光特性

Cell Cycle 細胞週期檢測試劑組

利用核酸染劑 **DAPI** **Propidium Iodide (PI)** **DyeCycle** 來偵測細胞核內染色體之倍體數，以判斷其細胞週期之狀態。

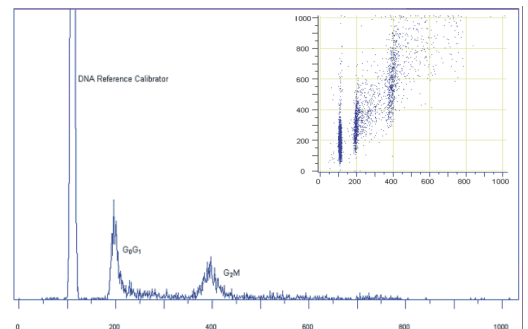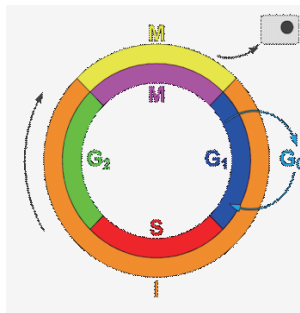

產品編號	產品名稱	包裝	優惠特價
6607055	DNA Prep Reagent Kit	100 tests	\$19,000
V35005	Vybrant DyeCycle Orange	200 tests	\$14,000
V35004	Vybrant DyeCycle Green	200 tests	\$13,800

超方便 使用 **DyeCycle**，您不必再費時打破細胞膜，即可直接穿透細胞偵測